


CLAVO TIBIAL MULTIAXIAL DE TITANIO

TRAUMA



CLAVO TIBIAL MULTIAXIAL DE TITANIO

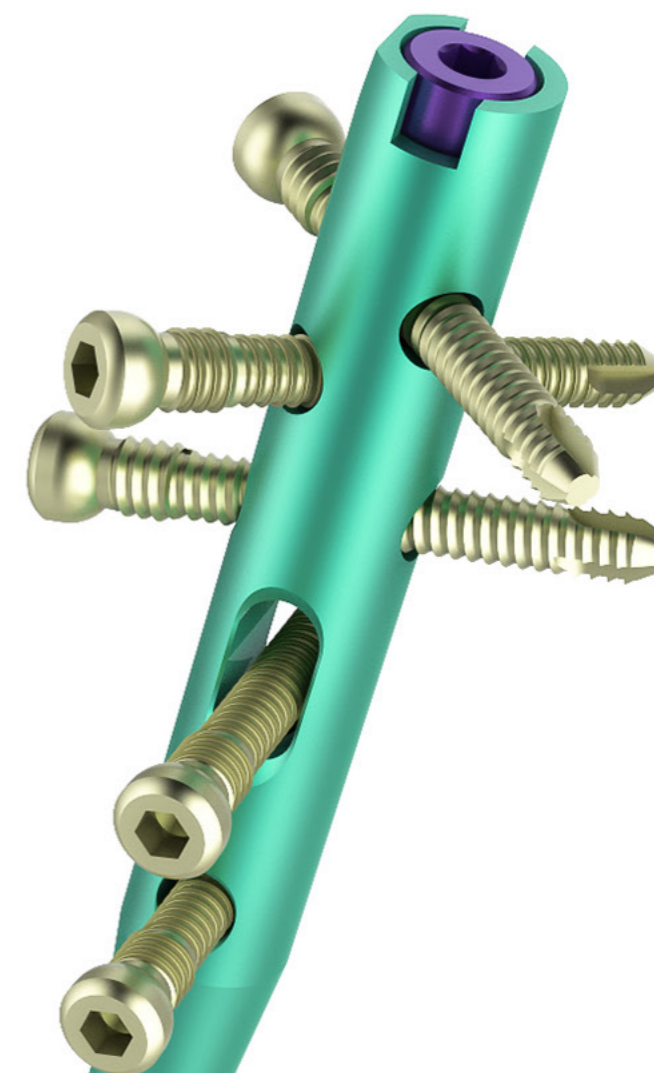

Clavo Tibial de Titanio Multiaxial


El Clavo Endomedular Tibial de Titanio Multiaxial CDH está diseñado para el tratamiento de fracturas complejas epifisarias tibiales con o sin compromiso diafisario.

Opciones de diámetros 9, 10 y 11 mm, con tornillos de bloqueo de compresión bicortical y tapones finales con opciones de extensión del implante.


Bloqueos Proximales

Tres opciones de bloqueo, combinadas con los tornillos de bloqueo bicortical, incrementan la estabilidad del fragmento proximal.

Dos bloqueos proximales oblicuos a 45° y un bloqueo antero-posterior de 15° de angulación mejoran la resolución de focos fracturarios complejos.

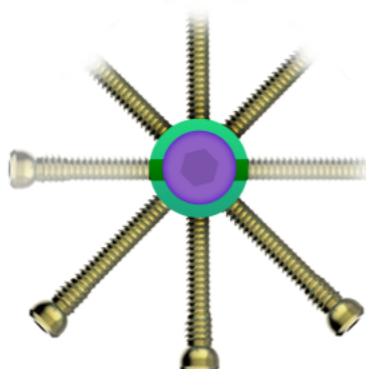

Dos bloqueos mediolaterales permiten la compresión primaria o la dinamización secundaria.

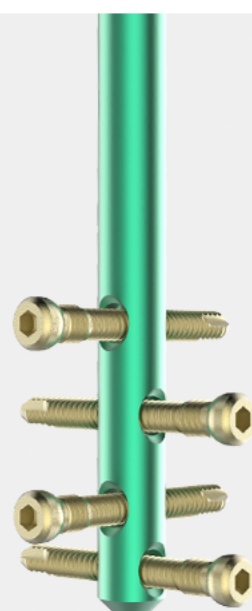


Bloqueos Distales

Dos bloqueos distales anteroposteriores preservan las partes blandas y evitan rotaciones.

Dos bloqueos mediolaterales brindan mayor estabilidad del fragmento distal.

INSTRUMENTAL

El instrumental guiado de alta precisión para la colocación de los cerrojos distales permite reducir satisfactoriamente el tiempo intraoperatorio.

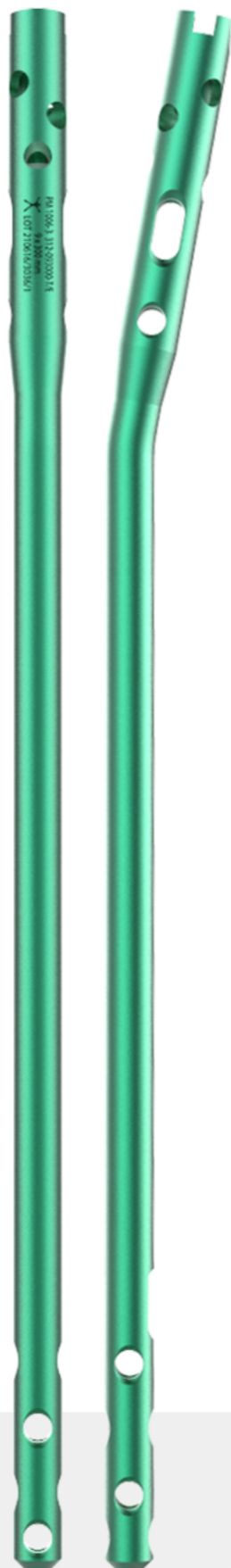


Tapones Finales

Los tapones finales permiten tres opciones de posicionamiento:



- 0 mm** el tapón final termina en el borde proximal del clavo
- 5 mm** el tapón final se prolonga 5 mm sobre el borde proximal del clavo.
- 10 mm** el tapón final se prolonga 10 mm sobre el borde proximal del clavo.

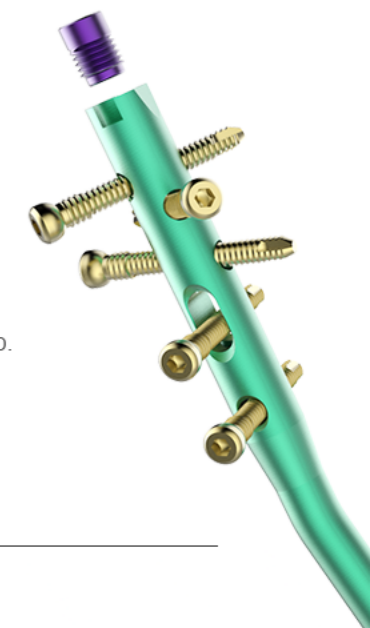

Set de Implantes

CLAVO TIBIAL DE TITANIO MULTIAXIAL

312-09285-T/E	Clavo Endom.	Tibial Titanio MULTIAXIAL	Dimensiones	9 x 285 mm
312-09300-T/E	Clavo Endom.	Tibial Titanio MULTIAXIAL	Dimensiones	9 x 300 mm
312-09315-T/E	Clavo Endom.	Tibial Titanio MULTIAXIAL	Dimensiones	9 x 315 mm
312-09330-T/E	Clavo Endom.	Tibial Titanio MULTIAXIAL	Dimensiones	9 x 330 mm
312-09345-T/E	Clavo Endom.	Tibial Titanio MULTIAXIAL	Dimensiones	9 x 345 mm
312-09360-T/E	Clavo Endom.	Tibial Titanio MULTIAXIAL	Dimensiones	9 x 360 mm
312-10285-T/E	Clavo Endom.	Tibial Titanio MULTIAXIAL	Dimensiones	10 x 285 mm
312-10300-T/E	Clavo Endom.	Tibial Titanio MULTIAXIAL	Dimensiones	10 x 300 mm
312-10315-T/E	Clavo Endom.	Tibial Titanio MULTIAXIAL	Dimensiones	10 x 315 mm
312-10330-T/E	Clavo Endom.	Tibial Titanio MULTIAXIAL	Dimensiones	10 x 330 mm
312-10345-T/E	Clavo Endom.	Tibial Titanio MULTIAXIAL	Dimensiones	10 x 345 mm
312-10360-T/E	Clavo Endom.	Tibial Titanio MULTIAXIAL	Dimensiones	10 x 360 mm
312-11285-T/E	Clavo Endom.	Tibial Titanio MULTIAXIAL	Dimensiones	11 x 285 mm
312-11300-T/E	Clavo Endom.	Tibial Titanio MULTIAXIAL	Dimensiones	11 x 300 mm
312-11315-T/E	Clavo Endom.	Tibial Titanio MULTIAXIAL	Dimensiones	11 x 315 mm
312-11330-T/E	Clavo Endom.	Tibial Titanio MULTIAXIAL	Dimensiones	11 x 330 mm
312-11345-T/E	Clavo Endom.	Tibial Titanio MULTIAXIAL	Dimensiones	11 x 345 mm
312-11360-T/E	Clavo Endom.	Tibial Titanio MULTIAXIAL	Dimensiones	11 x 360 mm

TORNILLO CERROJO DE TITANIO

722-05025-T	Tornillo Cerrojo Titanio	Dimensiones	5 x 25 mm
722-05030-T	Tornillo Cerrojo Titanio	Dimensiones	5 x 30 mm
722-05035-T	Tornillo Cerrojo Titanio	Dimensiones	5 x 35 mm
722-05040-T	Tornillo Cerrojo Titanio	Dimensiones	5 x 40 mm
722-05045-T	Tornillo Cerrojo Titanio	Dimensiones	5 x 45 mm
722-05050-T	Tornillo Cerrojo Titanio	Dimensiones	5 x 50 mm
722-05055-T	Tornillo Cerrojo Titanio	Dimensiones	5 x 55 mm
722-05060-T	Tornillo Cerrojo Titanio	Dimensiones	5 x 60 mm
722-05065-T	Tornillo Cerrojo Titanio	Dimensiones	5 x 65 mm
722-05070-T	Tornillo Cerrojo Titanio	Dimensiones	5 x 70 mm
722-05075-T	Tornillo Cerrojo Titanio	Dimensiones	5 x 75 mm
722-05080-T	Tornillo Cerrojo Titanio	Dimensiones	5 x 80 mm
722-05085-T	Tornillo Cerrojo Titanio	Dimensiones	5 x 85 mm
722-05090-T	Tornillo Cerrojo Titanio	Dimensiones	5 x 90 mm
722-05095-T	Tornillo Cerrojo Titanio	Dimensiones	5 x 95 mm
722-05100-T	Tornillo Cerrojo Titanio	Dimensiones	5 x 100 mm

TAPÓN FINAL TIBIAL DE TITANIO

332-00-T/E	Tapón Final Tibial para Clavo MULTIAXIAL	Altura	0 mm
332-05-T/E	Tapón Final Tibial para Clavo MULTIAXIAL	Altura	5 mm
332-10-T/E	Tapón Final Tibial para Clavo MULTIAXIAL	Altura	10 mm



PRESENTACIÓN

Envase individual en Doble Blister Esterilizado por Radiación Gamma

STERILE R